


Pflegeempfehlung

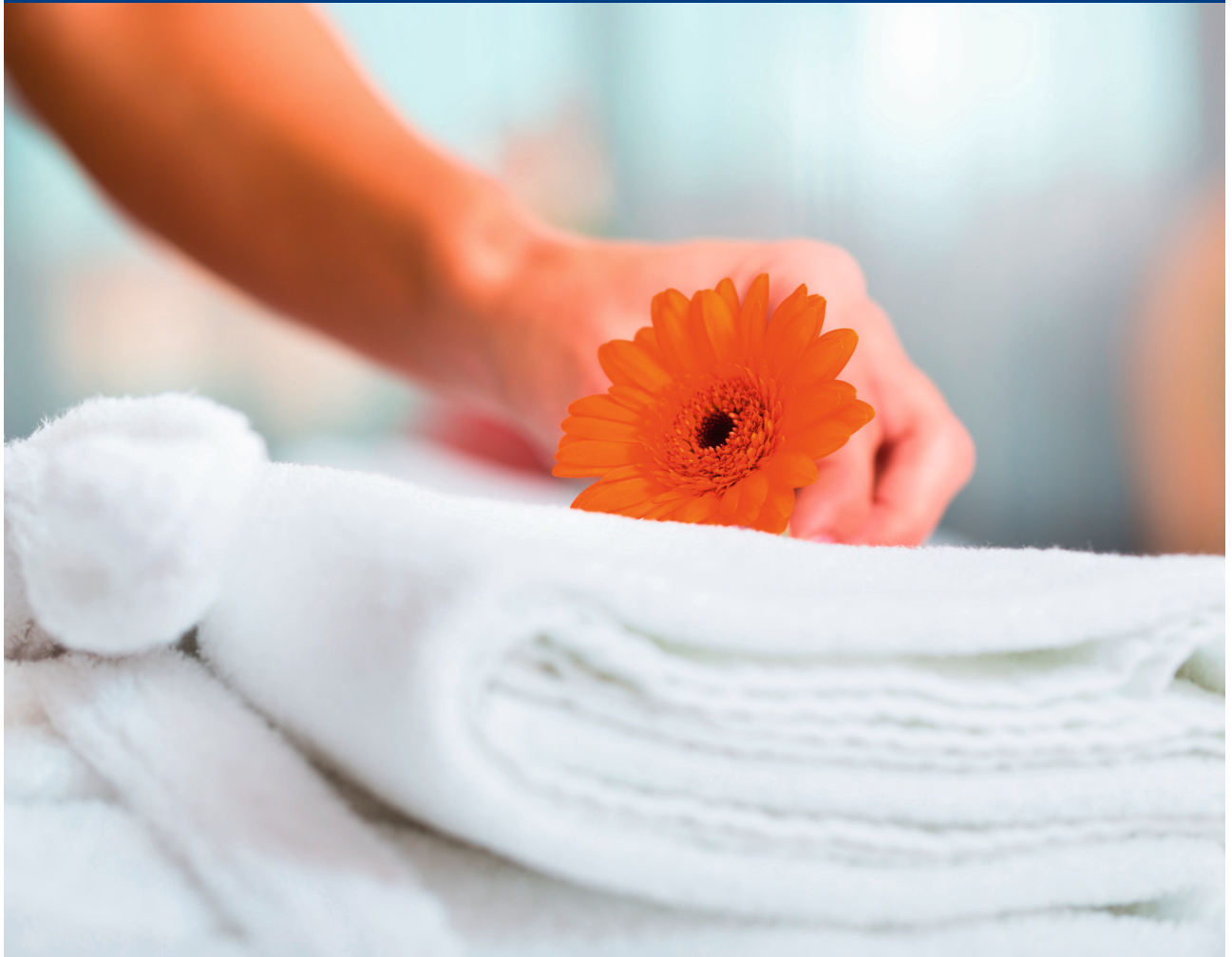

Material:
**Kunstleder / PVC / Wachstuch / PU-Stoff / Nylonspezial-
 gewebe PU- sowie PUD-Beschichtung/dicht**

Die Bezugsmaterialien sind mit Wischdesinfektionsmitteln lt. Desinfektionsmittelliste des VAH zu behandeln.

Desinfektionsmittel, die zur Reinigung und Flächendesinfektion empfohlen werden:

Hersteller	Mittel
Dr. Schumacher GmbH	Cleanisept / Wipes 5%ig
B. Braun Melsungen AG	Hexaquant lemon fresh 2%ig
Franken Chemie GmbH & Co. KG	Franko-Cid N 0,25%ig
Bode Chemie GmbH	Microbac forte 2,5%ig

Wir empfehlen aldehydfreie Produkte auf Basis oberflächenaktiver Wirkstoffe, zur Schonung der empfindlichen Oberflächen.
 Die Desinfektionsmittel sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis zu verwenden.
 Es darf kein Konzentrat verwendet werden.
 Für die Anwendung aldehydhaltiger Produkte übernehmen wir keine Gewährleistung der dauerhaften Haltbarkeit der Oberflächen.

Material:
Schaumstoff blank

Dampfsterilisation bis 120°C sowie Gassterilisation

Die Angaben basieren auf Praxiserprobungen sowie Erfahrungen unserer Lieferanten.